



Italianisch

GUIDA RAPIDA DI GLUCOMEN® AREO

1



Inserire una nuova striscia reattiva GlucoMen® areo sulla sommità del glucometro.

2



Prelevare una goccia di sangue.

3



Applicare una goccia di sangue sull'estremità della striscia reattiva.

4



Il risultato della misurazione compare dopo 5 secondi.

5



Premere il tasto di espulsione per estrarre la striscia reattiva in modo igienico.



MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY DI GLUCOMEN® AREO

Messaggio


Cosa significa il messaggio?

Cosa devo fare?




Errore del l'hardware di sistema

Rivolgersi al servizio di assistenza
Telefono: +49 -800 - 45 82 66 36
(gratuito)

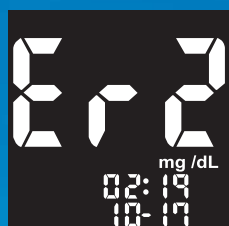


Striscia reattiva usata o danneggiata

Utilizzare una striscia reattiva nuova

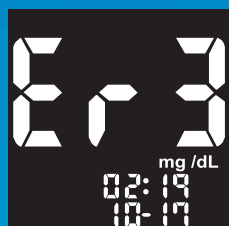


Errore del campione di sangue

Applicare una quantità maggiore di sangue su una nuova striscia reattiva

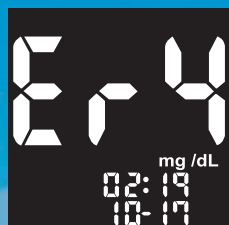

La striscia reattiva è stata rimossa troppo presto

Ripetere la misurazione con una nuova striscia reattiva

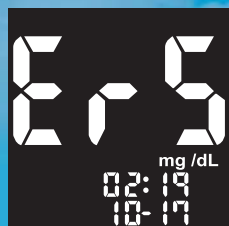

Il collegamento NFC è stato interrotto

Ripetere la trasmissione dei dati