



Norwegisch

# GLUCOMEN® AREO HURTIG-GUIDE

1



Sett inn en ny GlucoMen® areo teststrimmel i toppen av måleren.

2



Innhent en dråpe blod.

3



Påfør en dråpe blod på tuppen av teststrimmelen.

4



Etter 5 sekunder vises målerresultatet på displayet.

5



Trykk på utløserknappen for å fjerne teststrimmelen på en hygienisk måte.




# GLUCOMEN® AREO DISPLAYMELDING

Melding

Hva betyr denne meldingen?

Hva bør jeg gjøre?

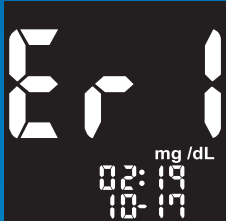

Programvarefeil

Kontakt vårt service-team



Teststrimmel skadet eller  
tilsmusset

Bruk en ny teststrimmel




Feil ved blodprøve

Påfør mer blod på en ny teststrimmel



Teststrimmel fjernet for tidlig

Gjenta testen med en  
ny teststrimmel

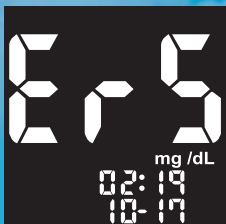

NFC tilkobling feilet

Gjenta overføringen