



Russisch

GLUCOMEN® AREO КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1



Введите новую тест-полоску
Glucomen® areo в глюкометр сверху.

2



Возьмите каплю крови
для анализа.

3



Нанесите каплю крови на
конец тест-полоски.

4



Спустя 5 секунд на экран будет
выведен результат замера.




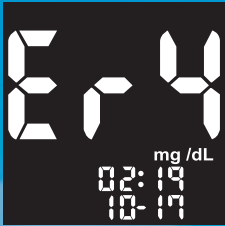

5



Нажмите клавишу выброса, чтобы
стерильно удалить тест-полоску.



GLUCOMEN® AREO СИГНАЛЫ ДИСПЛЕЯ

Сигнал	Значение	Ваши действия
	Ошибка системной программы	Обратитесь в отдел обслуживания клиентов по тел. +49 -800 - 45 82 66 36 (бесплатный)
	Тест-полоска повреждена или уже использовалась	Повторите тест, используя новую тест-полоску
	Ошибка пробы крови	Повторите тест, нанеся на новую тест-полоску чуть больше крови
	тест-полоска была удалена слишком рано	Повторите тест, используя новую тест-полоску
	Ближняя бесконтактная связь (NFC) была прервана	Повторите передачу данных